

libra



OVS

LIBRA

Представляем вашему вниманию систему **LIBRA** - оборудование, которое поможет обеспечить комфортный прием пациентов с ограниченными возможностями.


Согласно статье 15 Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в РФ», органы государственной и муниципальной власти, а также организации, независимо от формы их собственности и подчиненности, должны обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Предлагаем вам уникальную возможность проявить истинную заботу о тех, кому это действительно необходимо, а не только обеспечить выполнение требования законодательства.

Стоматологическая установка, оснащенная подъемником для инвалидных кресел **LIBRA**, позволит оказывать стоматологическую помощь людям, перемещающимся на инвалидных колясках, так же эффективно и с комфортом для пациента и врача, как и любым другим пациентам.

Это решение покажет социальную ответственность вашей организации, привлечет к вам новых пациентов и поможет укреплению вашего имиджа, как серьезного и современного лечебного учреждения.



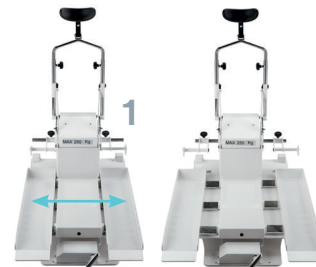

- 1 Регулировка ширины в соответствии с размерами инвалидной коляски от 54 до 76 см
- 2 Настройка высоты и угла наклона

Безопасный прием пациентов с ограниченными возможностями

Платформа **LIBRA** обеспечивает легкую и быструю установку инвалидного кресла любого типа, даже электрического, рядом с напольной установкой **OMS**.

Возможность отодвинуть кресло



LIBRA

Это универсальная система, которая комбинируется со стоматологической установкой. Обычное кресло пациента легко убирается в сторону благодаря мобильному основанию. На его место также легко ставится платформа **LIBRA**. Задние колеса и вращающееся переднее колесо с устройством регулировки по высоте и натяжным ремнем обеспечивают простоту перемещения и надежное крепление инвалидного кресла к платформе.

С системой **LIBRA** пациент получает прямой доступ к стоматологической установке прямо на своем собственном инвалидном кресле.

Опорная конструкция – это сталь с порошковой окраской. Стойка имеет регулировку по высоте в 20 см. Угол наклона платформы может регулироваться от 0° до 45°.

... и разместить платформу для пациентов на инвалидных креслах



Компания OMS разработала решение Libra

55-летний опыт, современные технологии, качественные материалы и итальянский дизайн – достоинства, которые позволяют компании **OMS** отвечать всем потребностям стоматологов и ассистентов, в том числе обеспечивать хорошие взаимоотношения с пациентом, основанные на ответственности и безопасности.

Регулируемый
съемный подголовник



Все используемые материалы
гипоаллергенны и нетоксичны

Нагрузка
до 250 кг

Обращаем ваше внимание, что инвалидное кресло не входит в комплект поставки.

