

ВЫ СТРЕМИТЕСЬ  
К СОВЕРШЕНСТВУ?  
С TENEО ВЫ ЭТОГО  
ДОСТИГНЕТЕ



# ВЫ ХОТИТЕ ИННОВАЦИЙ. TENEО СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

Sirona постоянно развивает свои инновационные технологии, чтобы удовлетворять требования тех, кто хочет работать и сейчас, и в будущем с самыми современными и удобными технологиями, сохраняя при этом высокие стандарты качества, дизайна и работы. Благодаря разнообразию вариантов комплектации и инновационной концепции настраиваемой работы, TENEО – это инвестиции в будущее. Все получится. Вместе с Sirona.



# ВЫ ТРЕБУЕТЕ КАЧЕСТВО. TENEО УСТАНАВЛИВАЕТ ЕГО СТАНДАРТЫ

Отправная точка самых высоких стандартов – желание обладать абсолютным качеством. Поэтому инновационный класс стоматологических установок Sirona разрабатывался и изготавливался с учетом самых высоких стандартов качества. Используя TENEО, вы сможете работать с надежным оборудованием высочайшего класса.

Продуманная до мелочей эргономика и высококачественные материалы помогают обеспечить оптимально разработанный технологический процесс и создать основу для идеальных результатов. Если вы хотите улучшить свою работу за счет применения новейших технологий или интегрировать новые разработки, TENEО предлагает вам долговечное оборудование с повышенной надежностью.

#### **Внедрение передовых технологий**

TENEО постоянно развивается, так что вы всегда будете работать с соблюдением самых высоких стандартов. Вы можете использовать USB-интерфейс для интеграции новых функций и обновления программного обеспечения стоматологической установки, а Ethernet-интерфейс – для связи с обслуживающим сервисом и для простого устранения неполадок, что обеспечит вам современный и комфортный рабочий процесс сегодня и в будущем.

#### **Высокое качество изготовления и великолепный дизайн**

В инновационном классе стоматологических установок используются только лучшие материалы: каркас и несущие конструкции кресла и спинки представляют собой продуманную до мелочей комбинацию из стальных и алюминиевых деталей. Поэтому стоматологическая установка TENEО обладает малым весом и чрезвычайно прочна.

#### **Качество «Сделано в Германии»**

Инновационный класс стоматологических установок был полностью разработан, изготовлен и испытан на заводе Sirona в Бенсхайме, а в нашем Центре инноваций мы его постоянно развиваем. В результате мы гарантируем качественную и надежную работу стоматологической установки TENEО, что обезопасит ваши инвестиции.

# ВЫ ХОТИТЕ ПРЕДЛАГАТЬ ПАЦИЕНТАМ ПЕРВОКЛАССНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. TENEО СОЗДАН ДЛЯ ЭТОГО

Благодаря TENEО ваша работа будет всегда на самом высоком уровне.

Интегрированные функции настольных приборов, интуитивно понятное управление и инновационные элементы управления со многими дополнительными опциями позволят вам проводить лечение эффективно, быстро и удобно. Вы будете комфортно работать, а пациенты смогут почувствовать себя настолько удобно и расслабленно, как никогда раньше.

**ВЫСОЧАЙШИЙ  
УРОВЕНЬ  
КОМФОРТА  
ДЛЯ ВРАЧА  
И ПАЦИЕНТА**

Инновационный рабочий процесс и автоматизированные функции, электромеханическое перемещение модуля врача параллельно креслу пациента, терморегулирующая и мягкая обивка, поясничная опора и функция массажа.

**ИНТУИТИВНЫЙ  
ИНТЕРФЕЙС  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Простой, с возможностью индивидуальной настройки и последующего дооснащения интерфейс с сенсорной панелью управления.

**ИНТЕГРАЦИЯ  
ФУНКЦИЙ  
НАСТОЛЬНЫХ  
ПРИБОРОВ**

Для проведения эндодонтического лечения и имплантологии.



## ВЫ ИЩЕТЕ НЕЧТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ. У TENEО ЕСТЬ СВОЙ СТИЛЬ

TENEО – это совершенное сочетание формы и функциональности, отмеченное престижными наградами за выдающийся дизайн. Вы можете выбрать из трех вариантов цветовых решений, дополненных мягкой обивкой, именно вашу установку, конфигурацию которой подскажет ваше вдохновение.



# ВАМ НУЖЕН НАДЕЖНЫЙ TENEО ВСЕГДА НА ВА

Продуманная до мелочей эргономика в сочетании с интегрированными функциями TENEО обеспечивает удобный и приятный процесс работы для достижения идеальных результатов лечения в течение всего рабочего дня.

**Функция памяти автоматического подголовника**  
Положение автоматического подголовника можно запрограммировать под конкретного пациента – при следующем визите установка сама определит правильное для этого пациента положение\*.

**Оптимальная рабочая высота**  
Независимо от роста пациента TENEО всегда настраивается на вашу индивидуальную, наиболее подходящую высоту рабочей области (вертикальная фиксация расположения рта пациента).



**Электромеханическое перемещение модуля врача параллельно креслу пациента**  
Программируется и управляется ножной педалью. Это позволяет перемещать модуль врача в нужное положение без усилий и даже без помощи рук.



**Оптимизированный доступ**  
Благодаря широкому диапазону позиционирования модуля врача и ассистента и независимой от модуля врача регулировке положения поддона.



**Инновационная беспроводная педаль ножного управления**  
Неограниченная свобода движений, возможность управления без помощи рук и свободное позиционирование.



**Операционный светильник LEDview**  
Вместе со светодиодной подсветкой инструментов обеспечивает оптимальное освещение области лечения.


**НОВИНКА**  
**Положение кресла для конкретного пациента**  
Положение кресла для конкретного пациента можно запрограммировать индивидуально и при необходимости автоматически пользоваться сохраненными настройками\*.

\* Доступно при использовании вместе с ПО SIDEXIS 4.

# ВЫЙ ПАРТНЕР. ВАШЕЙ СТОРОНЕ

## НОВИНКА

Система кронштейна  
Высококачественные  
материалы  
и функциональный дизайн  
с монолитной поверхностью  
обеспечивают долгий срок  
службы и легкую очистку.

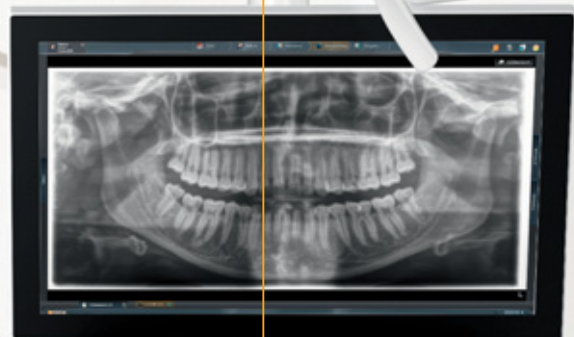

Эргономичный рабочий стул  
Эргономичный рабочий стул  
HUGO разработан для  
интуитивного поддержания  
правильной осанки в течение  
всего процесса вашей работы.

# ВЫ ХОТИТЕ ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. TENEО ПОДСТРОИТСЯ ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ

Интуитивный, индивидуально программируемый пользовательский интерфейс EasyTouch позволяет интегрировать в себя новые опции в любой момент времени. С помощью EasyTouch и инновационных инструментов Sirona вы каждый день будете достигать выдающихся результатов.

Хотели бы вы видеть только те функции, которые вам нужны в процессе лечения? Хотите иметь пользовательский интерфейс, который приспособится к вашим индивидуальным методикам работы? И хотите уже сегодня работать с технологиями завтрашнего дня? Желаете ли вы полностью сконцентрировать свое внимание на работе, а не на оборудовании? Вы по достоинству оцените новый интерфейс EasyTouch – простое и интуитивное управление всеми доступными уже сегодня функциями и возможность будущего дооснащения. Его меню легко адаптируется к вашим потребностям, обеспечивая минимальное время на подготовку к работе и максимально простое лечение на самом высоком уровне.



## Интегрированная имплантология

В режиме имплантологического лечения вы можете установить скорость вращения, крутящий момент и подачу стерильной охлаждающей жидкости для каждого этапа лечения.





# ВЫ ХОТИТЕ ЛЕЧИТЬ БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО. TENEО ДАСТ ВАМ ТОЧКУ ОПОРЫ.

**НОВИНКА**  
ЕЩЕ БОЛЬШЕ  
ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ  
ФУНКЦИЙ

Упрощенный рабочий процесс и отличный результат: благодаря интегрированной и оптимизированной функции эндодонтии ваш рабочий процесс всегда будет оптимальным. Вы сможете работать гигиенично, безопасно и эффективно.

Новая и усовершенствованная эндодонтическая функция гарантирует улучшение рабочего процесса и, следовательно, более успешное лечение. Во время лечения вы можете отслеживать все нюансы и работать без дополнительного настольного прибора или дополнительной ножной педали.

## Системы реципрокных файлов

Sirona является единственным производителем стоматологических установок, который интегрирует системы реципрокных файлов Dentsply Maillefer и VDW непосредственно в стоматологическую установку. Как и в настольных приборах этих производителей, реципрокные файлы можно выбрать и управлять ими с помощью встроенной библиотеки файлов TENEО. С помощью системы реципрокных файлов вы сократите время лечения и сможете работать с большим комфортом и максимально безопасно. Благодаря однократному использованию не нужна дезинфекция, очистка или стерилизация, что предотвращает перекрестное загрязнение.

wave • one®


wave • one®  
GOLD

RECIPROC®  
one file endo



## Интегрированная эндодонтия

Интегрированная функция для проведения эндодонтического лечения позволяет отказаться от дополнительных настольных приборов. Система точного управления крутящим моментом, а также опциональный апекслокатор обеспечивают оптимальную безопасность в процессе лечения, а распространенные файловые системы могут быть объединены в уникальную библиотеку.

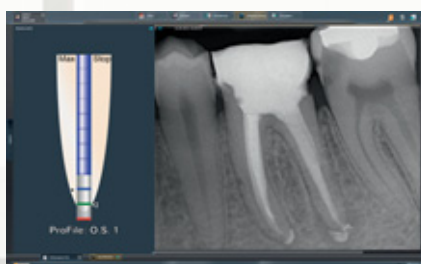

## Апекслокатор на мониторе

При использовании апекслокатора показывается расстояние от выбранного файла до конца корневого канала, что позволяет всегда держать его в поле зрения\*.



## Держатель для апекслокатора

Держатель обеспечивает гигиеничное хранение апекслокатора во время и после лечения. Кроме того, практичное расположение на модуле врача очень удобно в процессе работы.



## Угловой наконечник

### T1 LINE ENDO 6 L с подсветкой

Улучшенное освещение во время эндодонтического лечения повышает процент успешной терапии.

\* Доступно при использовании вместе с ПО SIDEXIS 4.

# ВЫ ОЖИДАЕТЕ БЛАГОД TENEО СОЗДАЕТ ДОВ

Стоматологические установки инновационного класса способны хранить в памяти положение кресла для конкретного пациента и обеспечивать его максимальным комфортом. А с помощью новейших возможностей в системе коммуникации с пациентами вы сможете завоевать еще больше доверия своих клиентов и их лояльность на долгие годы.



**Терморегулирующая обивка**  
Предотвращает перегрев в области сиденья и спинки кресла. Приятный охлаждающий эффект обеспечивает комфортное состояние пациента на протяжении всего сеанса лечения.

**Функция массажа**  
Функция массажа в спинке кресла пациента служит дополнительным средством релаксации, что особенно актуально для продолжительных сеансов лечения

**Функция активной поясничной опоры**  
Спинка кресла пациента анатомической формы регулируется индивидуально в зависимости от особенностей позвоночника каждого пациента.

# ДАРНЫХ ПАЦИЕНТОВ. ЕРИЕ


При работе со стоматологической установкой TENEО вам доступны самые современные инструменты для коммуникации с пациентом. Подключение к локальной сети с помощью сетевого интерфейса Ethernet позволяет получить доступ к интраоральным снимкам и другим цифровым данным прямо с консоли установки, и вы можете, например, использовать презентацию для того, чтобы объяснить пациентам процесс лечения или показать им видео и томограммы для иллюстрации возможных вариантов лечения.



**Камера с автоматической фокусировкой**  
Камера SiroCam AF<sup>+</sup> сочетает в себе превосходное качество изображения и легкость управления. Фокусировка и съемка производятся автоматически простым нажатием педали ногового управления.



**Монитор Full HD 22 дюйма**  
Монитор Full HD формата 16:9 обеспечивает лучшее качество изображения. Имеет встроенные динамики и разъемы HDMI, Displayport и S-Video.

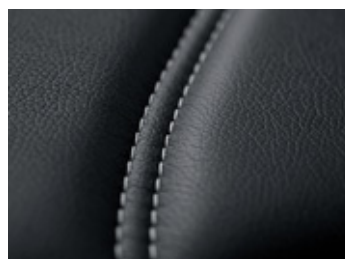

**Мягкая обивка**  
Мягкий, приятный на ощупь материал поверхности и удобная обивка для максимальной релаксации. Рельеф поверхности предназначен для идеально удобного расположения пациента в кресле.



**Комфортное позиционирование пациента**  
Кресло пациента, обладающее анатомической формой и имеющее уникальную систему подъема для регулировки высоты в диапазоне 370–820 мм.

# ВАМ НУЖНЫ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. TENEО – ЭТО НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЭРГОНОМИКА

Упрощение рабочего процесса и отличные результаты – с этой целью мы постоянно развиваем программу эргономики Sirona.

Программа эргономики Sirona – результат многолетнего опыта и исследований в этой области. Будучи лидером в цифровых технологиях и комплексных решениях в стоматологии, мы всегда думаем о будущем. «Круг эргономики» SIRONA отражает наше видение организации рабочего процесса стоматологической клиники, объединяющего в себе эргономику и повседневные задачи. Не случайно это именно круг – ведь программа эргономики Sirona находится в постоянном развитии.



## УДОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВРАЧА

**Больше свободы движений**  
Беспроводная педаль управления, электромеханическое перемещение модуля врача параллельно креслу пациента, большое пространство для колен под спинкой кресла пациента.

**Оптимизированный доступ**  
Отличная координация и гибкое позиционирование модулей врача и ассистента, независимое позиционирование поддона и модуля врача.

**Удобные рабочие стулья**  
HUGO, CARL.



## УДОБНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА

**Оптимальная регулировка кресла пациента**  
Удобная регулировка высоты кресла и автоматического подголовника с сохранением оптимальной высоты рабочей области независимо от роста пациента, память положения кресла и подголовника для конкретного пациента\*.

**Идеальная поддержка для позвоночника**  
ErgoMotion, OrthoMotion, функция поясничной опоры.

**Высокий уровень комфорта пациента**  
Система плавного подъема, терморегулирующая и мягкая обивка, функция массажа.



## ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЗОР

**Оптимальное освещение**  
Операционный светильник LEDview, LED-подсветка в инструментах.

**Автоматический подголовник**  
Автоматическая настройка под конкретного пациента и необходимый этап лечения\*.

**Прекрасные интраоральные снимки**  
Интраоральная камера SiroCam AF\* с автофокусировкой.



## ЧЕТКИЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

**Интуитивное управление**  
Пользовательский интерфейс EasyTouch с возможностью индивидуальной настройки.

**Интегрированные функции**  
Имплантологическая функция, функция эндодонтии, апекслокатор с отображением на мониторе SIVISION\*.

**Современное оборудование**  
Инновационные инструменты, продвинутая система коммуникации с пациентом, USB-интерфейс и интерфейс Ethernet.

## ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинические

Эстетические

Соответствующие уровню успешной современной клиники



Посмотрите видео про эргономику на [sirona.com](http://sirona.com)

\* Доступно при использовании вместе с ПО SIDEXIS 4.

# ВЫ ТРЕБУЕТЕ СОВЕРШЕННОЙ ГИГИЕНЫ. TENEО ПОЗАБОТИТСЯ И ОБ ЭТОМ

Гигиена в клинике должна быть простой и обеспечивать абсолютную безопасность. TENEО позволяет экономить время и одновременно соблюдать все самые строгие санитарные требования.

TENEО заботится о безопасности и здоровье пациентов. Все в стоматологической установке, начиная с гладких, легко очищаемых поверхностей и заканчивая съемными компонентами и встроенными насадками для санитарной обработки, подчинено принципу наивысшего уровня клинической безопасности. Поэтому вы можете отказаться от лишних процедур и сэкономить время работы персонала клиники.



#### Съемная чаша плевательницы

Для удобной очистки и образцовой клинической гигиены: может автоматически, т. е. без прикосновения рук, подводиться к пациенту и отводиться от него.



#### Встроенная система дезинфекции с функцией Aqua

Для постоянной дезинфекции спрея для инструментов и воды для полоскания рта, а также для санации всех ответственных каналов подачи воды в установке. Исключает возможность ошибок персонала и снижает количество ручных операций. В чрезвычайной ситуации функция Aqua позволяет продолжить работу даже без подключения к водопроводу.



#### Термодезинфицируемые элементы установки

Все критические с точки зрения гигиены элементы можно снять и подвергнуть термической дезинфекции или стерилизации. Это снижает опасность перекрестного заражения медицинского персонала и пациентов.



#### Встроенные адаптеры для санитарной обработки

Все шланги инструментов могут быть подсоединены для очистки к встроенным адаптерам санитарной обработки. Кроме того, аспирационные шланги могут быть подключены к адаптерам и промыты потоком воды нажатием одной кнопки непосредственно в процессе лечения. Эта функция опциональна и осуществляется с помощью чистящих и дезинфицирующих средств, опубликованных в перечне средств, одобренных компанией Sirona.



DGKH (Немецкое общество больничной гигиены) подтвердило приверженность компании Sirona соблюдению высочайших стандартов гигиенической безопасности в соответствии с рекомендациями Института Роберта Коха (федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней).

# ВАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Опции	Базовая комплектация
<b>Кресло пациента</b>	
Позиционирование кресла для конкретного пациента*	■
Автоматический подголовник с настройкой позиционирования под конкретного пациента*	■
Обивка «Премиум»	■
Мягкая обивка	□
Терморегулирующая обивка	□
Поясничная опора / функция массажа	□
Съемный подлокотник, отклоняемый вправо	□
Съемный подлокотник, левый	□
Педаль перекрестного действия	■
Педаль ножного управления с кабелем	■
Педаль ножного управления беспроводная	□
Разъем для подключения настольных приборов	□
Подушка для детей и пациентов небольшого роста	□
Монтажная плита для неровного пола	□
<b>Модуль врача (EasyTouch, 6 позиций для инструментов, съемные ручки и съемный держатель инструментов)</b>	
Пустер SPRAYVIT M со светодиодной подсветкой	□
1-й привод бора (для микромотора и турбины)	■
2-й привод бора (для микромотора и турбины)	■
3-й привод бора (для микромотора и турбины)	■
4-й привод бора (для микромотора и турбины)	□
Электрический микромотор BL	□
Электрический микромотор BL ISO C	□
Электрический микромотор BL Implant	□
Турбинный шланг	■
Ультразвуковой скейлер SIROSONIC TL	□
Электрохирургический коагулятор SIROTOM	□
Функция имплантологии	□
Функция эндодонтии	□
Функция для системы реципрокных файлов	□
Апекслокатор с визуализацией на мониторе SIVISION*	□
Встроенный насос для физраствора	□
USB-интерфейс	■
Управление курсором без помощи рук	■
Угловой наконечник T1 LINE ENDO 6 L с подсветкой	□
<b>Модуль ассистента (4 позиции для инструментов, съемный держатель инструментов)</b>	
Лампа полимеризационного света Satelec mini L.E.D.	□
Хирургический пылесос	□
Пустер SPRAYVIT M со светодиодной подсветкой	□

Опции	Базовая комплектация
Пылесос	■
Слюноотсос	■
Пылесос + слюноотсос с переключателями	□
<b>Гидроблок</b>	
Система постоянной дезинфекции с функцией санации	■
Очистка аспирационных шлангов водой	■
Очистка аспирационных шлангов с использованием химических средств	□
Разъем для подачи гидроколлоидного раствора	□
Система влажной аспирации с клапаном в плевательнице	■
Автоматический отделитель	□
Отделитель амальгамы	□
Съемная автоматическая поворотная стеклянная плевательница	■
Функции промывки и автопромывки	■
Функция Aqua	■
<b>Цифровая система коммуникации с пациентом</b>	
Камера SiroCam AF*	□
Монитор 22" на поддоне, поддон в комплекте	□
Монитор 22" на стойке светильника	□
Блок питания для камеры в модуле врача	□
Комплект кабелей для подключения к ПК	□
<b>Рабочий стул</b> (на выбор: длинная или короткая газовая пружина)	
HUGO Freehand (ножная регулировка высоты сиденья)	□
HUGO Manual (ножная регулировка высоты сиденья)	□
HUGO Manual Plus (ручная регулировка высоты сиденья, опорное кольцо для ног)	□
CARL Manual (ручная регулировка высоты сиденья)	□
CARL Manual Plus (ручная регулировка высоты сиденья, опорное кольцо для ног)	□
<b>Дополнительные опции</b>	
Поддон	□
Интерфейс для ПК (Ethernet)	■
Управление ПК с помощью панели EasyTouch	■
Дистанционная диагностика	■
Операционный светильник LEDview	□

■ В составе базовой комплектации. □ Дополнительная опция.

\* Доступно при использовании вместе с ПО SIDEXIS 4.

# ОПЦИИ

## ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


КОМФОРТ	ИННОВАЦИЯ	ЭНДОДОНТИЯ	ИМПЛАНТОЛОГИЯ	SIVISION
				
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 рабочих стула HUGO или CARL, версия и высота на выбор</li> <li>Терморегулирующая обивка или мягкая обивка</li> <li>Функция массажа</li> <li>Функция поясничной опоры</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 SPRAYVIT M для модуля врача и для ассистента</li> <li>2 электрических микромотора BL (BL ISO C за доплату)</li> <li>Ультразвуковой скейлер SIROSONIC TL</li> <li>Операционный светильник LEDview</li> <li>Беспроводная педаль ножного управления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция эндодонтии</li> <li>Встроенный апекслокатор</li> <li>Угловой наконечник T1 LINE ENDO 6 L с подсветкой</li> <li>ISO-переходник с подсветкой (опция)</li> <li>Держатель для апекслокатора</li> <li>Дополнительная опция – функция для системы реципрокных файлов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция имплантологии</li> <li>Встроенный насос для физраствора</li> <li>Электрический микромотор BL Implant</li> <li>Угловой наконечник IMPLANT 20:1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Монитор 22 дюйма</li> <li>Камера SiroCam AF+</li> <li>Монитор на поддоне или стойке светильника</li> <li>Блок питания для камеры в модуле врача</li> </ul>



HUGO Manual Plus



HUGO Freehand

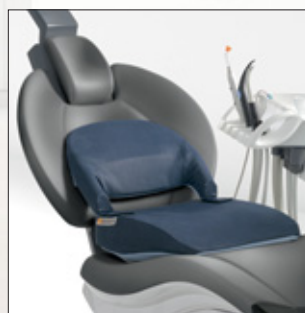

Подушка для детей и пациентов небольшого роста



Мягкая обивка

**НОВИНКА.** Функция для системы реципрокных файлов

Разъем для подключения настольных приборов



Встроенный насос для физраствора



Разъем для подачи гидроколлоидного раствора



Камера SiroCam AF+

**НОВИНКА.** Крепление для HELIODENT PLUS на установке

Монитор 22" на поддоне



Монитор 22" на стойке светильника

# ВСЕГДА В АВАНГАРДЕ ИННОВАЦИЙ!

Sirona, являясь мировым лидером в области инноваций в стоматологии, постоянно инвестирует средства в новые разработки, а значит, в будущее современной стоматологии в целом. Мы уверены, что благодаря объединению цифровых технологий с комплексными решениями и постоянному стремлению к оптимизации лечебного процесса мы поможем вам улучшить результаты вашей клиники, сделав лечебный процесс более комфортным и безопасным для каждого пациента, и обеспечить значительную экономическую выгоду. Недаром постоянные инновации, мировой рост продаж и непрерывное совершенствование качества обслуживания делают Sirona производителем № 1 в глобальном мире, производителем, которому доверяют тысячи практикующих врачей и техников по всему миру. Они знают, что **«Все получится. Вместе с Sirona».**



\* Sirona – №1 по общемировому объему продаж стоматологического оборудования под одной торговой маркой (по данным исследования компании Sirona Dental Systems GmbH). Допустимы технические изменения и ошибки в тексте. Отпечатано в России.



## CAD/CAM-системы

Путь от пионера до лидера. Уже почти 30 лет мы разрабатываем цифровые технологии для стоматологии и открываем новые горизонты для стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий.



## Рентгеновские системы

Наивысшее качество изображения с наименьшей дозой облучения. Более чем 100-летний опыт в разработке стоматологических рентгеновских систем сделал нас партнером № 1 для клиник по всему миру.



## Стоматологические установки

Визитная карточка современной стоматологической клиники. Мы стремимся создать идеальную с точки зрения эргономики и технологий установку, адаптированную для каждого врача, удовлетворяющую самым строгим требованиям и обеспечивающую комфортные условия для врача и для пациента.



## Инструменты

Преимущества, говорящие сами за себя. Мы следим за обеспечением правильного баланса между проверенным качеством, индивидуальной эргономикой и инновационными технологиями, чтобы работа пользователя была максимально удобной.



## Аппараты для гигиены

Профессионализм, гарантирующий безопасность. Когда речь идет о гигиене в стоматологической практике, мы никогда не идем на компромисс!